



NEW!



## Transferpette® pro

マイクロピペット トランスファーペッテpro

BRAND. For lab. For life.®

Transferpette® pro は、日常のラボワークに求められる高い精度と再現性、優れた操作性を備えたマイクロピペットです。このたび新たに、ピペッティング条件の変化(チップ形状、試料特性、温度など)に対して再現性を維持するために、一時的に吸引量を調整可能な「条件一時調整機能」を備えました。これまで通り、工具を使わずに簡単に精度補正ができるイージーキャリブレーションも可能です。他にも各種機能性の向上を図っております。

- 01 手へのフィット感を向上
- 02 シャフトをスリム化
- 03 容量ダイヤルロック中の誤操作対策
- 04 耐久性の向上
- 05 条件一時調整機能

選ぶメリットを実感!!  
紹介動画はコチラ



MICROPIPETTES

# さらに使いやすく、機能を追加

## 内部機構を守る安心設計




容量ロック中は誤ってダイヤルを操作しても空回りし、ピペッティング時に容量が変化しない機能を搭載。また、最大・最小容量を超えた容量設定をしようとしても空回りすることで内部機構を守るため、耐久性が向上。

## 条件一時調整機能



ピペッティング条件の変化(チップ形状、試料特性、温度など)に対して再現性を維持するために、一時的に吸引量を調整可能。  
用途例: 密度、粘度、蒸気圧などが水と大きく異なる液体を扱う場合など

## 手へのフィット感を向上

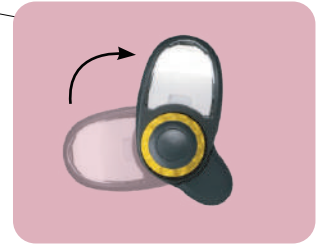

指掛けは9段階で調節可能なため、手へのフィット感が向上。長時間のピペッティング作業でも快適な操作が可能。

## 新しい容量範囲



シングルチャンネルでは最大容量300  $\mu$ L、2.5 mL、マルチチャンネルでは最大容量1250  $\mu$ Lを新たに追加。

## シャフトを更にスリム化 更に口の狭い容器にも対応可能

## Transferpette® pro Transferpette® S の比較表

	Transferpette® pro	Transferpette® S
容量範囲 シングルチャンネル(可変式)	12サイズ: 0.1 $\mu$ Lから10 mLまで	10サイズ: 0.1 $\mu$ Lから10 mLまで
容量範囲 マルチチャンネル	6サイズ: 0.5 $\mu$ Lから1250 $\mu$ Lまで	5サイズ: 0.5 $\mu$ Lから300 $\mu$ Lまで
シャフト部分のサイズ	スリム※1	標準
指掛けの調整	✓	-
片手操作	✓	✓
ユニバーサルチップコーン※2	✓	✓
容量ロック機能	✓	✓
容量設定機構の保護	✓	-
イージーキャリブレーション機能	✓	✓
条件一時調整機能	✓	-
オートクレーブ(121°C)	✓	✓
耐紫外線性	✓	✓

※1 一例として容量20-200  $\mu$ Lの本体におけるシャフト先端から50mm部分の直径が約18.2%減少しています。

※2 BRANDのチップ用に最適化されていますが、他社のチップとも互換性があります。(テクニカルデータに記載の精度はBRANDのチップ使用した場合のみ有効)

**BRAND® はBRAND GMBH+CO KG (ドイツ) の登録商標です。**

当社による技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立ちとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店

**Cica** 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
(03) 6214-1094

HOME PAGE: <https://www.kanto.co.jp>



BRa-31 (202604)