

ノンフロンへ
フロンから

買い替え キャンペーン

対象機器が
15%-20% OFF

開催期間 2026 ▶ 1.30まで

冷媒漏えいによる地球温暖化ゼロを目指して!

冷媒ガス漏れ

10年保証

※冷媒漏えいによる修理費を
業界初 10年間全額保証いたします

※2025年6月当社調べ

薬用保冷库・冷凍庫

MediFridge シリーズ
Vital シリーズ

フロン排出抑制法対象外です

ノンフロンモデル
で解決

「フロン使用の冷蔵庫」は、冷凍機簡易点検の対象となる為、3ヶ月以上の点検義務があります。フロン使用の冷蔵庫ごとに記録、保管が必要です。

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は、罰則が科されます。

例) 使用、廃棄時の義務違反は、行政処分・50万円以下の罰金

フロン破壊・再生の確認、フロン類廃棄に係る費用負担が義務付けられています。

機器廃棄時は、フロン回収を依頼する書面、交付された引取証明書を3年間保存することが義務付けられています。

GALILEI

Be cool, Be alive.



FMS-505GX

FMF-305FX

FMD-D350ESH

MediFridge シリーズ

Vital シリーズ

運転モード切替機能

EC (Eco Control) モード

温度範囲が2 ~ 25℃と広範囲の設定が可能。

要冷薬品のみならず、常温薬品の保管もできます。1℃単位で表示



HC (High Control) モード

設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。

●温度分布（設定±1℃以内）

●温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。



1~7℃を0.1℃単位で表示

厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。

収容物の取り出しが容易



スライド扉は片方ずつしか開きません。



片側開きも、両側開きも可能。収容物の取り出しが容易になります。


メディカルフリーザー専用仕様

■バスケット標準装備 (FMFシリーズ)

一つのバスケットに、マイクロプレート10枚1セットを12セット収納可能(バスケット14個でマイクロプレート計1,680枚収納可能)

FMF-305FXは7個付
FMF-501FD-FMF-505FDXは12個付

庫内バスケット外形寸法(内寸法)

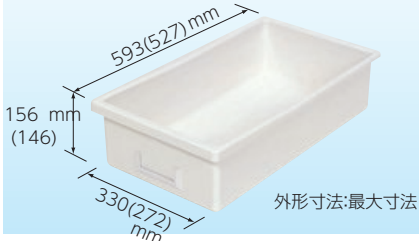


結露の少ない安定した保冷環境

スイング型扉

●扉ガラス周りにウレタン発泡材入りで、熱口スを低減します。

●庫内収容物を確認できるガラス面積も確保しています。

●結露の発生しやすいガラス周囲にヒーターを通电、表面温度上昇と結露を極力抑

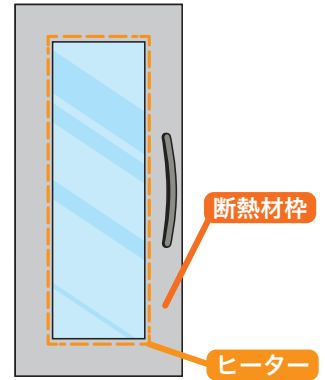


Vitalシリーズ

デュアル冷却方式 (FMD-W330ESHは除く)

独立した冷凍サイクルを2系統搭載することで、片側の冷凍サイクルが故障した際の温度上昇リスクを低減させ、貴重なサンプル保管に対する信頼性・安全性を高めた商品です。

■デュアル冷却システム(イメージ)

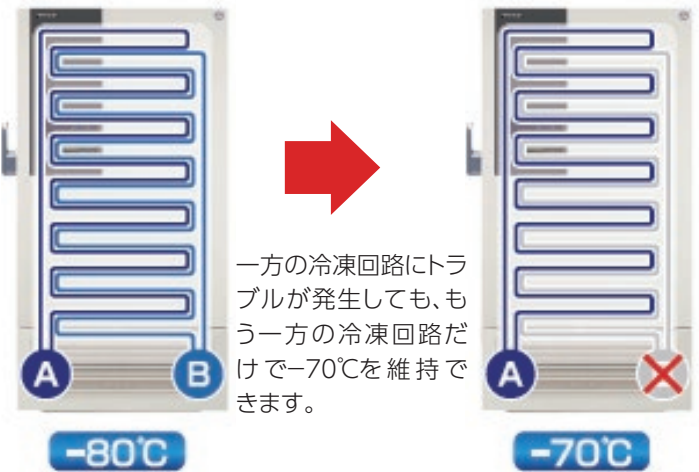

★本キャンペーン価格は、一年以内に対象機器及び従来機のお見積りをされていない方限定(弊社以外への見積り含む)。
本体キャンペーン価格以外に搬入費、オプションなどは別途お見積り。

★キャンペーン価格(税抜)

	型番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚板枚数	質量	標準価格(税抜)	
MediFridge シリーズ 薬用保冷庫	FMS-305GUX	冷蔵300L	W800×D450(548)×H1,870mm	10枚	100kg	369,000円	296,000円
	FMS-505GX	冷蔵500L	W800×D650(748)×H1,870mm	10枚	112kg	612,000円	490,000円
薬用冷凍冷蔵庫	FMS-F155GSX	冷蔵室 173L 冷凍室 62L	W500×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 3枚 冷凍室 1枚	95kg	388,000円	311,000円
	FMS-F305GX	冷蔵室 315L 冷凍室 113L	W800×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 2枚	132kg	486,000円	389,000円
	FMS-F405GX	冷蔵室 432L 冷凍室 176L	W900×D750(848)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 4枚	145kg	717,000円	574,000円
MediFridge シリーズ メディカルフリーザー	FMF-305FX	冷凍300L	W500×D729(777)×H1,795mm	バスケット7個	102kg	330,000円	264,000円
	FMF-505FX	冷凍548L	W820×D729(777)×H1,795mm	バスケット14個	134kg	448,000円	359,000円
	FMF-505FDX	冷凍516L	W820×D729(792)×H1,795mm	バスケット12個	153kg	530,000円	424,000円
Vitalシリーズ 超低温フリーザー	FMD-D350ESH	冷凍350L	W670(741)×D875(980)×H1,850mm	3枚	250kg	1,815,000円	1,543,000円
	FMD-D520ETH	冷凍519L	W770(841)×D875(980)×H1,990mm	3枚	290kg	2,255,000円	1,917,000円
	FMD-W330ESH	冷凍330L	W750(845)×D867(969)×H1,850mm	3枚	258kg	1,298,000円	1,104,000円



関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(03) 6214-1094

HOME PAGE: <https://www.kanto.co.jp>